# 防護ガウンの作り方

# 農業用透明マルチ編

農業用 透明ポリエチレンマルチシート 180cm

感染予防の推進 医療・介護の現場の安心のために

### ◆防護用ガウン制作のポイント

#### 身体を覆うサイズ(大きめ)

- 袖は、手首が隠れるくらいの長さ 袖は長めに手のひらにかかるくらいがよいでしょう
- 着丈は約110cm、膝が隠れるくらいの長さ


#### 制作場所は、清潔に保ちましょう


- テーブルなど、アルコール消毒で拭くなど清潔に保ちましょう
- 制作者は、手指の消毒をしてから作業しましょう
- グループで作業時は、人との距離を取り、3密を避けましょう

## ◆準備するもの

- ・180cm幅 農業用 透明ポリエチレンマルチシート 通称=農ポリ 又は、マルチシート
- ・模造紙 2枚 + A4用紙 2枚 ・マジック
- ・はさみ・カッター
- ・養生テープ/クラフトテープ 5cm幅
- ・セロハンテープ
- ・アイロン
- ・キッチンペーパー (アイロンのあて布代り)

- ◆作業の工程と留意点
- ·180cm幅 農業用 透明ポリエチレンマルチシート
  - ※両手を広げた大きさをカバーするサイズ
- 1. 型紙を作る 模造紙・ペン
- 2. マルチシートを型紙に合わせ置く
- 3. アイロンで、シートを型紙に沿って張り付ける
  - ※アイロン温度は「中」 少し強めに2秒押し当てる
  - ※キッチンペーパーをアイロンのあて布に使う
- 4. 型紙通りに、シートを切り抜く
- 5.後ろ部分切り込みを入れ、処理する

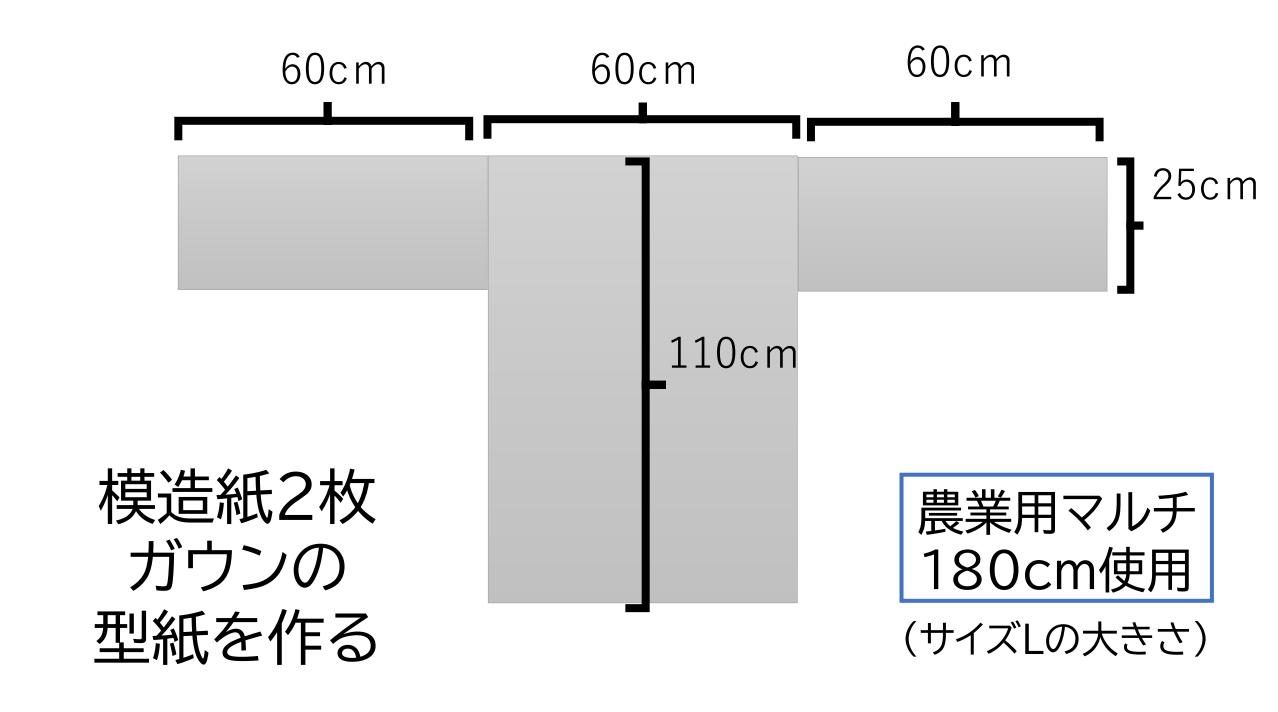

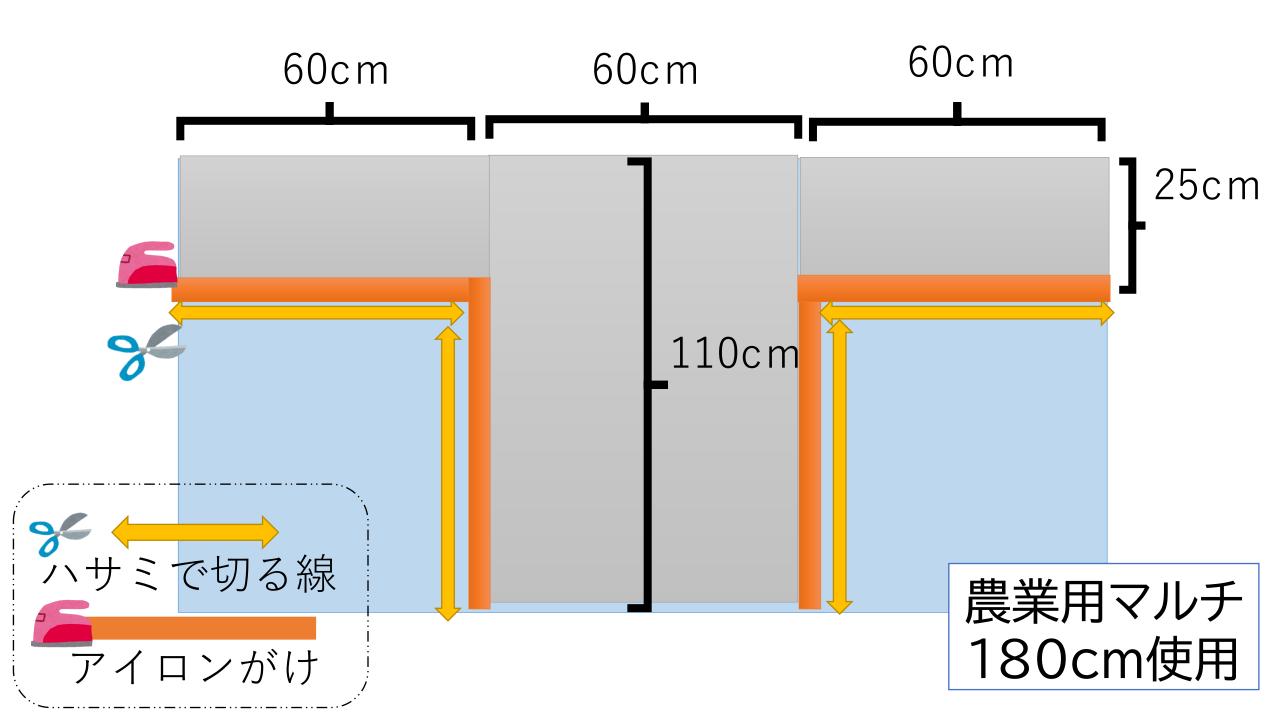



# アイロン使用の注意点

・段ボールや板などを敷く(アイロン台替わり)


・アイロンで、シートを型紙に沿って張り付ける ※アイロン温度は「中」少し強めに2秒押し当てる ※キッチンペーパーをアイロンのあて布に使う

・やけどに注意



## ◆背中の加工

割烹着のように 背中に切れ目を入れる ↓ テープで仮止め

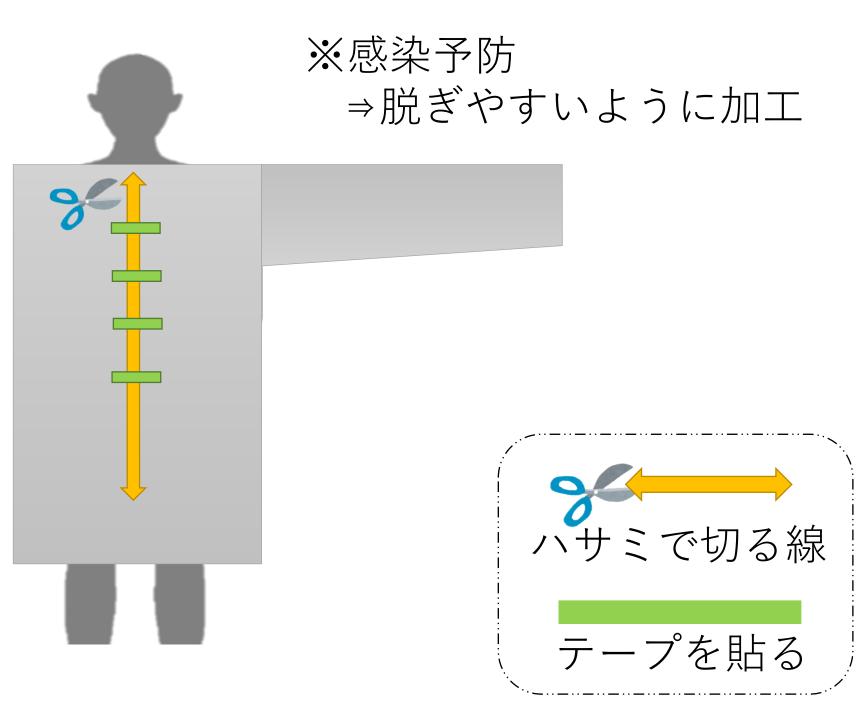

## 使用時のポイント

・手袋・マスクも一緒に利用し、感染を防ぎましょう

・1度現場で着用したら、最新注意で取り扱い使い捨てを

・着衣時、外側で触れた部分は、内側に包みこんで捨てましょう

・着用した手袋・マスクも、同様に脱着しましょう

・最後に、手を消毒または、洗いましょう